

Resona I9

Sistema de ultrasonido para diagnósticos

Innovación en todos los sectores



+52 5516124892



www.polymediccompany.com

Innovación

El **Resona i9** ofrece una experiencia completamente nueva por las innovaciones que se realizaron tanto interna como externamente. Se caracteriza por su revolucionaria plataforma ZST+ que eleva la calidad de imagen del ultrasonido a un nivel superior, y proporciona un excelente equilibrio para la resolución espacial y temporal, mejorando la visualización en la uniformidad de los tejidos.

El **Resona i9** ofrece excelentes soluciones de imágenes en aplicaciones específicas con e caz claridad, inteligencia sobresaliente y destacadas herramientas de diagnóstico como: STE de alta frecuencia de cuadro para una onda de corte constante y un acceso preciso de la rigidez del tejido, Smart Breast y Smart Thyroid para el análisis automático y estándar de lesiones, V Flow como un enfoque novedoso para la hemodinámica vascular integral.

Te da la bienvenida al instante un diseño de sistema de ultrasonido que no se parece a nada antes visto. El **Resona i9** cuenta con un panel de control inteligente, iConsole, con teclas de tinta electrónica personalizables, ajustes otantes de espacio completo, estructura plegable a un metro de altura, batería de larga duración y un diseño súper silencioso, además de otras características de inigualable calidad. Estos elementos de diseño innovadores ayudarán a que reduzcas la fatiga al mínimo durante los estudios.



Flexibilidad ilimitada de la exploración que va más allá de lo imaginado

iConsole. Panel de control inteligente

El diseño del panel de control inteligente y específico para exámenes clínicos es una innovación revolucionaria diseñada para adaptarse de manera óptima a diferentes escenarios clínicos, como ABD, SMP, VAS, CAR, URO, OB, etc. Gracias a las seis teclas especiales de tinta electrónica con pantallas digitales, la iConsole puede ajustar de forma adaptativa el diseño y las teclas durante el cambio de pruebas. El usuario es el que lo define. Se pueden establecer configuraciones personalizadas, y la pantalla digital en las teclas de tinta electrónica no desaparecerá, incluso cuando se apague el equipo.



Exploración con partes extendidas



Exploración con partes flexionadas



Exploración en la cama

Diseño cuidadoso para una comodidad extrema

- Pantalla completa sin bisel de **23,8"** con imágenes grandes para una experiencia de inmersión.
- Monitor que protege los ojos. El brillo se puede ajustar.
- Pantalla táctil full-HD de **15,6"** con interacción intuitiva.
- Interruptor de acceso directo para ver las últimas exploraciones y el uso de los últimos transductores.
- Enchufes elevados para cambiar el transductor sin agacharse.
- Diseño súper silencioso de **26dB**.



*sistema de frenos sujeto a cambios sin previo aviso

Obtenga ahora mismo atención de excelencia para el paciente

Solo dóblelo y está listo

Puede plegarse a una altura mínima de 1 metro y transportarse fácilmente en MPV (vehículo multiusos) para un servicio clínico móvil fácil y oportuno. El ancho del cuerpo de 55 cm. Esto le permite pasar fácilmente por la puerta para un acceso rápido y obtener imágenes en cualquier departamento clínico.



*sistema de frenos sujeto a cambios sin previo aviso

Exámenes al lado de la cama del paciente sin cables de alimentación

La batería de larga duración permite una exploración continua de ultrasonido de hasta 4 horas. Por lo tanto, nunca necesitará cables de alimentación, incluso durante los exámenes al lado de la cama del paciente.



Alarma automática de energía residual


Cuando sostenga la manija derecha durante el modo de espera o apagado del sistema, el indicador luminoso de energía residual se activará automáticamente como un recordatorio oportuno del uso de la corriente de energía.




Soluciones de imágenes infinitas generado por ZST+

La plataforma ZST+ es una innovación extraordinaria, que representa una evolución del ultrasonido. Se transforman las métricas del ultrasonido. Es decir, se pasa de la formación convencional de haces al procesamiento basado en datos del canal.

Supera la limitación tradicional de compensación entre resolución espacial, resolución temporal y uniformidad de tejido. De esta manera, se brinda una calidad de imagen excepcional para in nitas soluciones de imágenes con mejoras continuas.

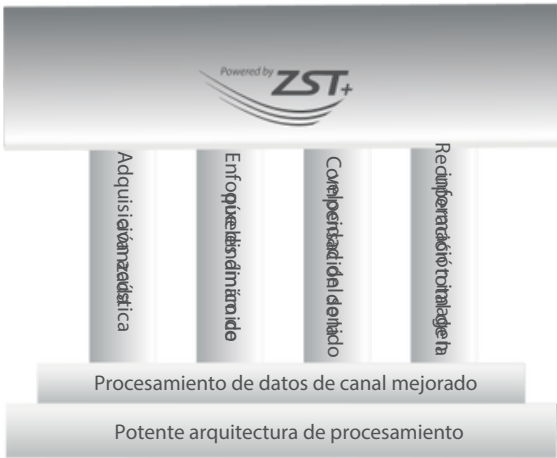

Resona I9 proporciona soluciones clínicas integrales para aplicaciones específicas. Basado en un conocimiento profundo de diferentes escenarios clínicos, ofrece todo tipo de innovaciones en herramientas de diagnóstico avanzadas, inteligencia sobresaliente y análisis preciso para mejorar significativamente la calidad del diagnóstico, el control de calidad y la eficiencia de la exploración.

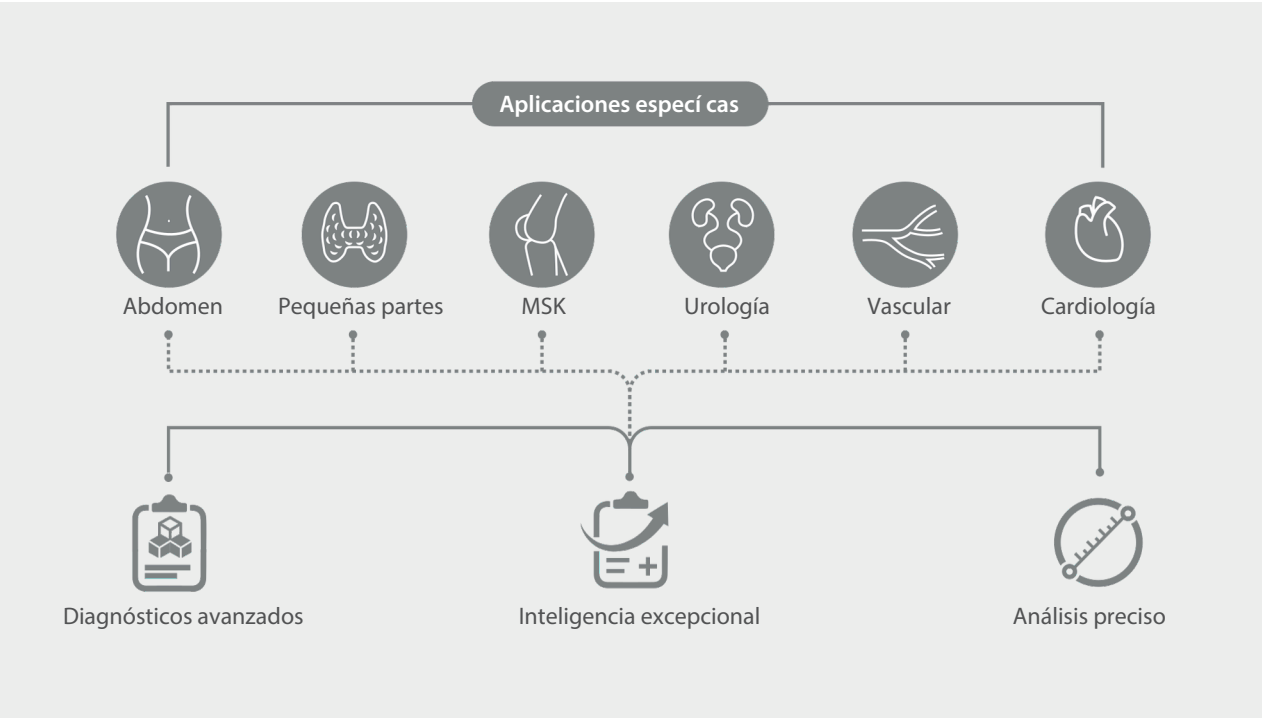


Soluciones de imagen infinitas en aplicaciones específicas

Aumento de la inteligencia con con anza

Diagnóstico inteligente y preciso de lesiones mamarias. Smart Breast

Es un sistema inteligente de análisis de lesiones mamarias para que la exploración de rutina sea más precisa y productiva. El análisis inteligente BI-RADS permite la detección, medición, anotación, análisis y generación de informes de lesiones de forma totalmente automática. El protocolo de exploración orientado a lesiones aumenta de forma e caz el rendimiento del control de calidad. Además, el manejo sistemático de múltiples lesiones y la evaluación de múltiples planos garantizan aún más información diagnóstica y precisión.

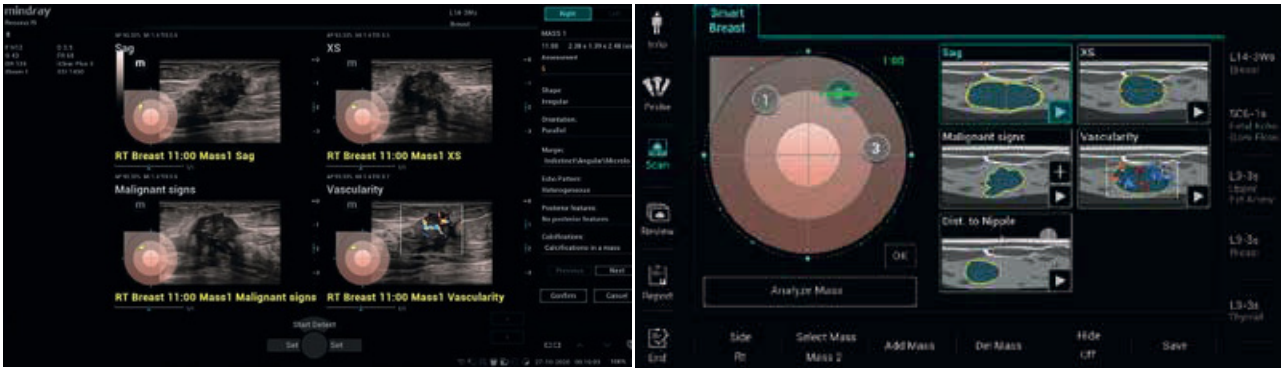


Evaluación fácil y rápida de la esteatosis hepática. Smart HRI

El índice hepatorenal inteligente es una herramienta fácil y rápida que sirve para brindar una evaluación cuantitativa de la esteatosis hepática. Basado en una imagen 2D, permite el reconocimiento automático de órganos y el cálculo automático de la relación de brillo del hígado y la corteza renal. Smart HRI ofrece datos más ables y precisos que la estimación cualitativa tradicional.





Evaluación preoperatoria intuitiva de la varicosidad. V Mapping

Dibuje intuitivamente la patología del vaso en el mapa anatómico que se muestra en la pantalla táctil. La información y la anatomía relacionadas se pueden integrar en los informes de manera sencilla, también, ayuda mucho en la evaluación preoperatoria de las varices.

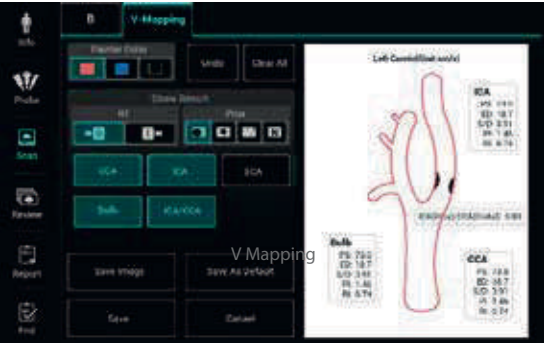

Evaluación productiva y estándar de nódulos tiroideos. Smart Thyroid

Es una herramienta inteligente de análisis e informes de nódulos tiroideos para hacer que su rutina clínica de ultrasonido de tiroides sea más precisa y productiva. El análisis TI-RADS basado en múltiples planos permite una clasi cación de nódulos tiroideos más completa y precisa. Mientras tanto, el ujo de trabajo automatizado optimizado proporciona un escaneo de tiroides más efectivo.

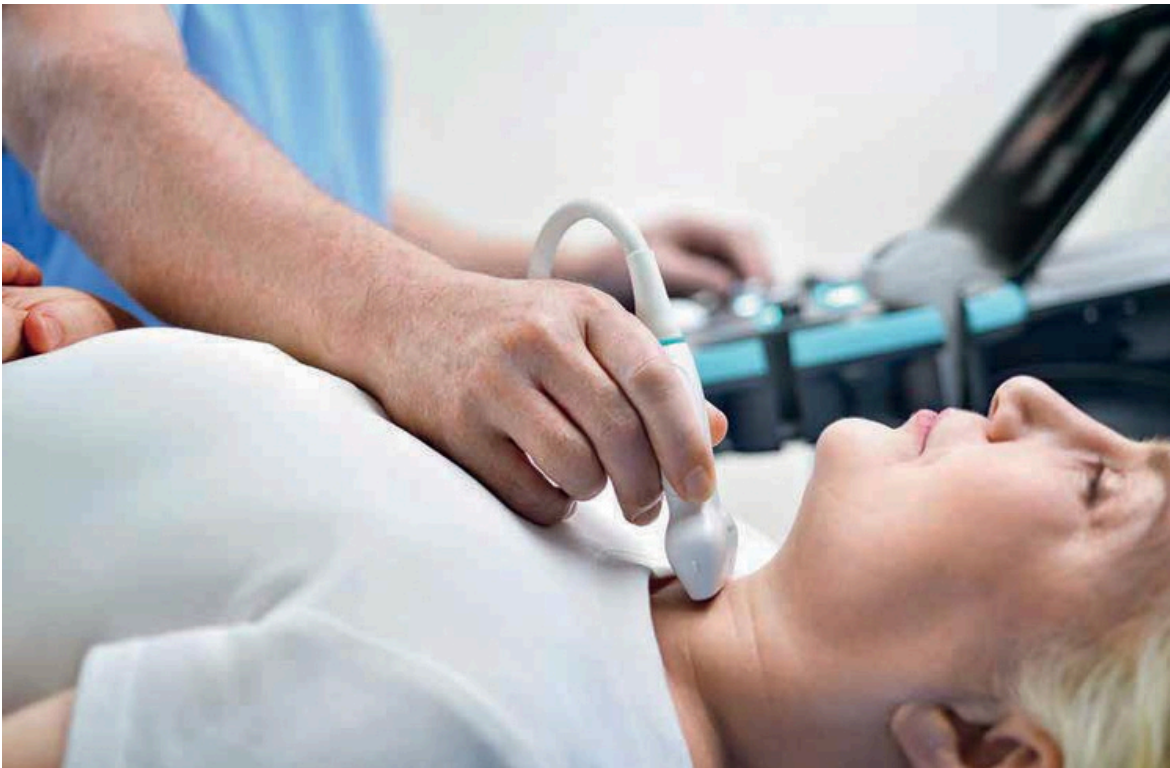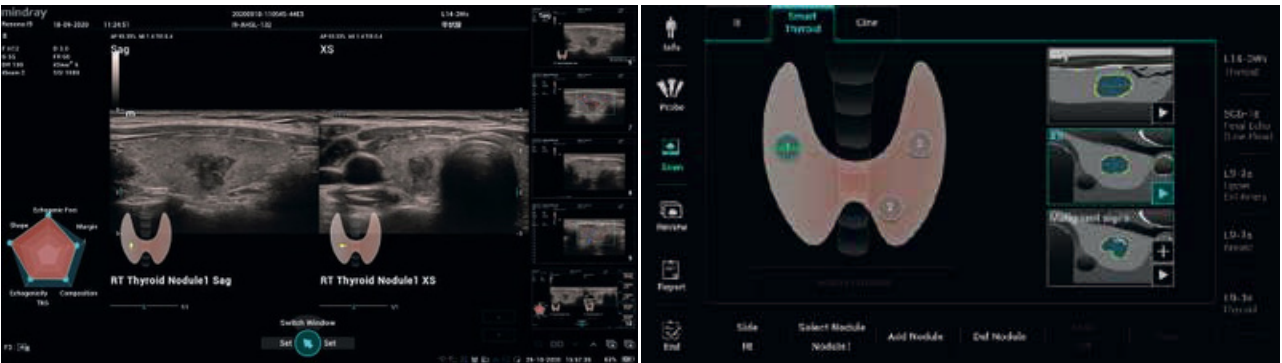


Carcinoma papilar de tiroides

Mediciones y análisis de mucha precisión

Evaluación de IMT con mayor precisión. RIMT


El IMT basado en datos de RF es independiente de la imagen y ofrece estadísticas de IMT automáticas y extremadamente precisas de 6 ciclos cardíacos en tiempo real.

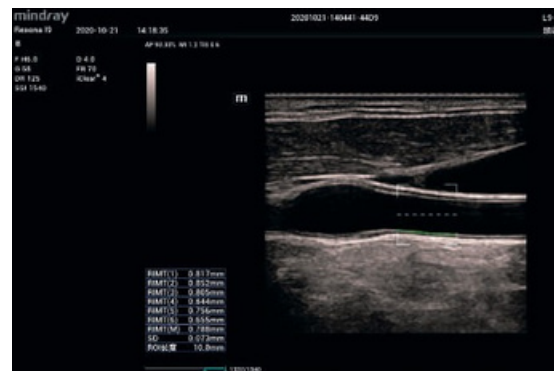

RIMT

Análisis preciso de la dureza de la pared del vaso. R-VQS


R-VQS proporciona un análisis preciso con el coeficiente de dureza del vaso y la velocidad de la onda de pulso. Ayuda al diagnóstico temprano y la prevención de la aterosclerosis arterial.

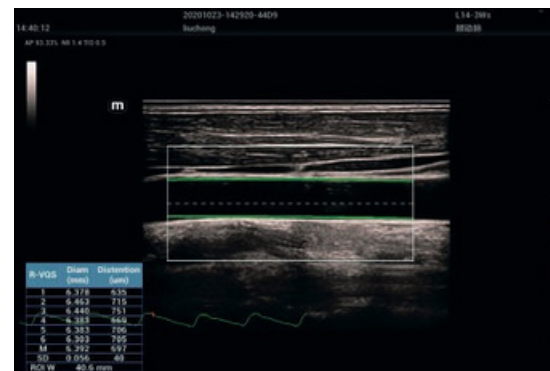

R-VQS

Evaluación del movimiento del miocardio independiente del ángulo. TT QA


El TT QA rastrea el movimiento del miocardio mediante la detección de patrones de moteado 2D y proporciona una evaluación precisa e independiente del ángulo del movimiento del miocardio.

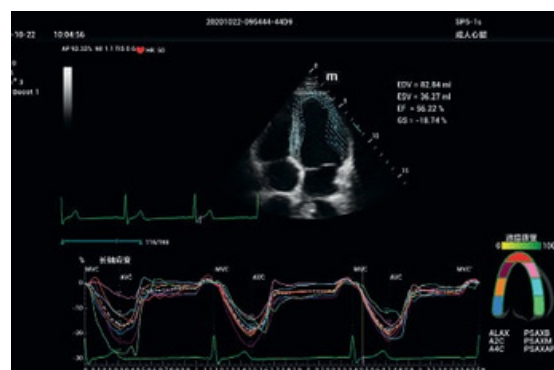


TT QA

Medidas sencillas de la función cardíaca. Auto EF


El Auto EF es una forma inteligente de analizar clips de eco 2D para reconocer automáticamente los marcos diastólicos y sistólicos, y así generar una serie de mediciones para evaluar la función del ventrículo izquierdo.

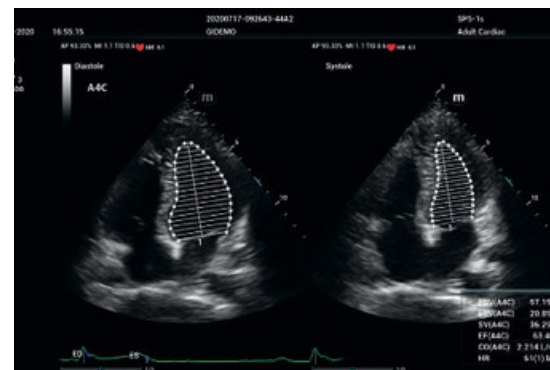

Auto EF

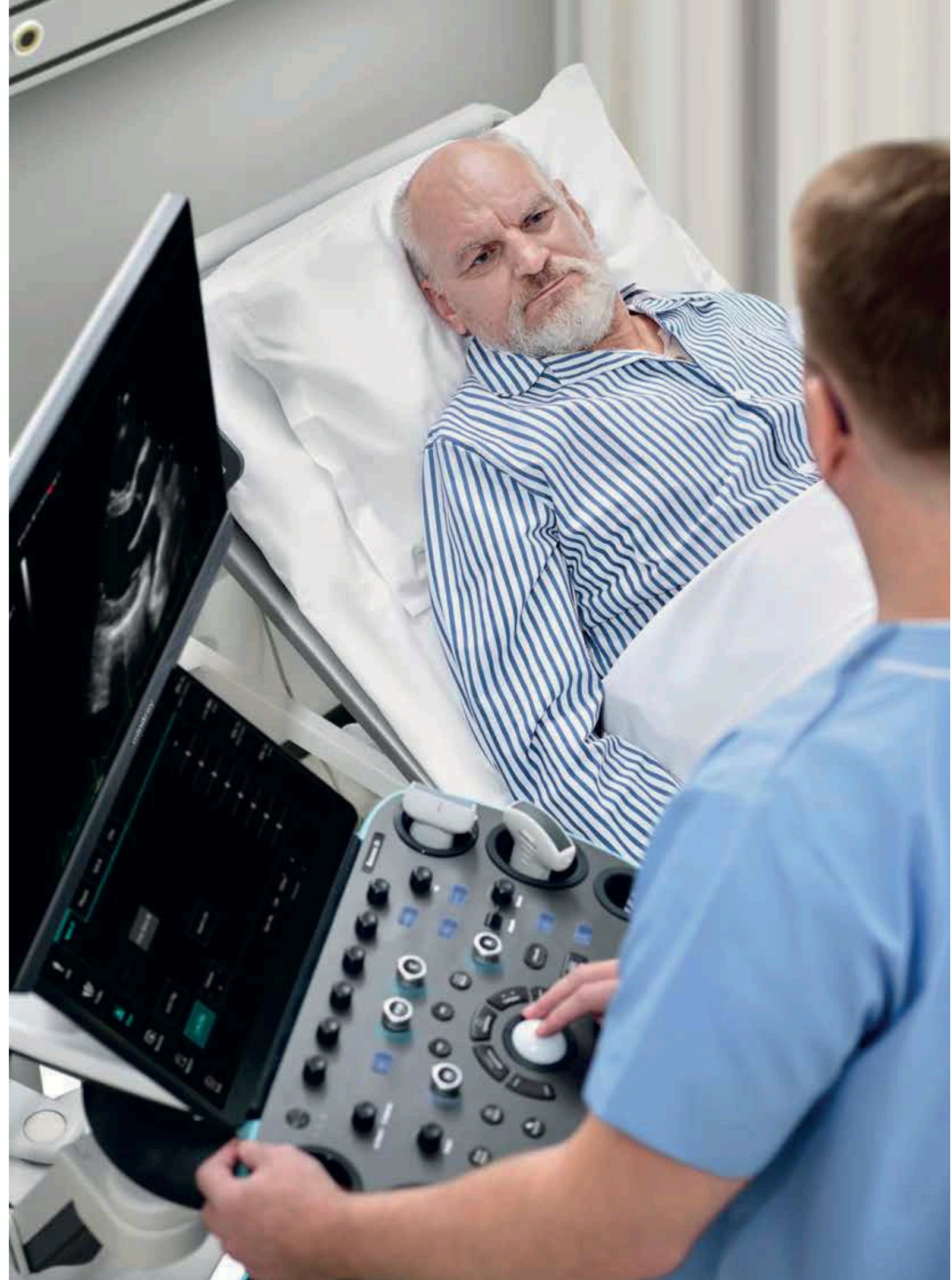

Excelente confianza con mucha claridad

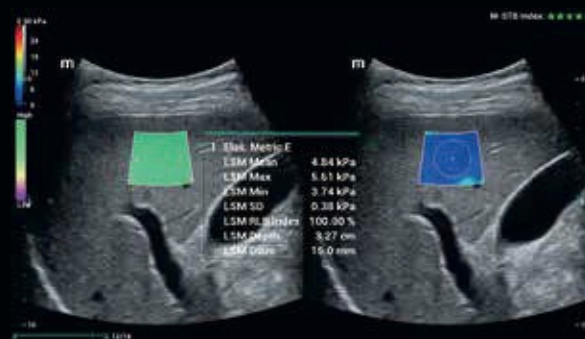

HiFR STE del hígado


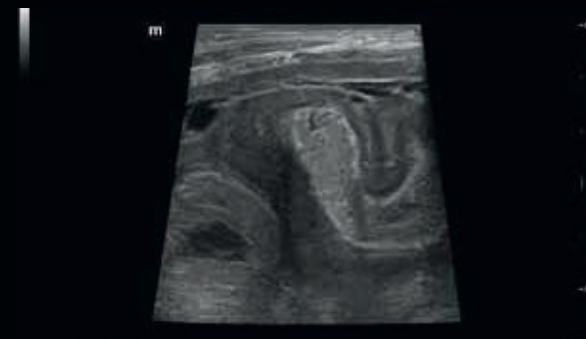


Imagen intestinal



Arteria carótida común

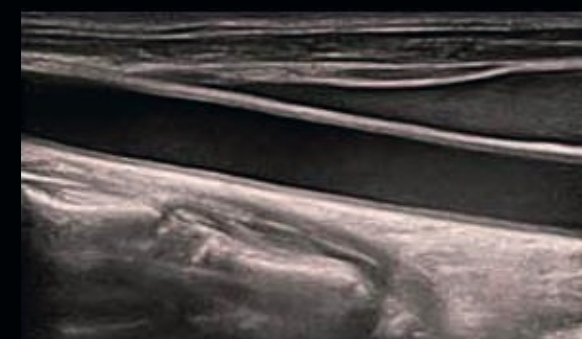

Estenosis de la arteria carótida




Hemangioma hepático



Perfusión del ojo renal



Masa del seno

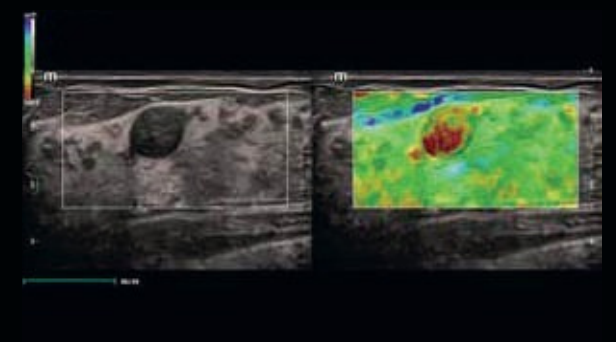


Elastografía de la masa mamaria




Tumor de vejiga




Flujo de potencia testicular

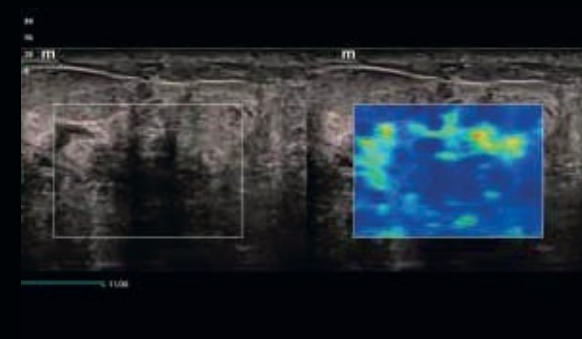

Masa del seno STE

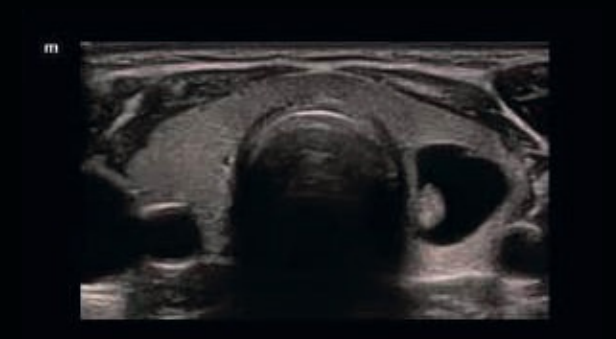


Nódulo tiroideo

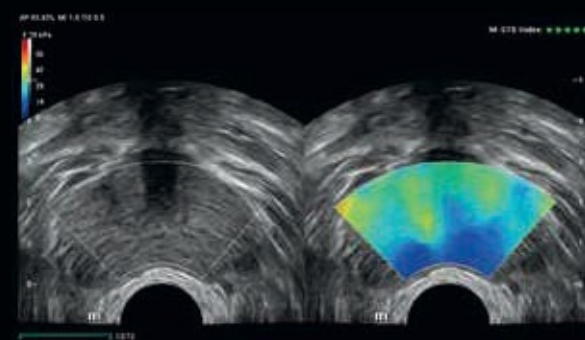


Próstata STE



Corazón adulto

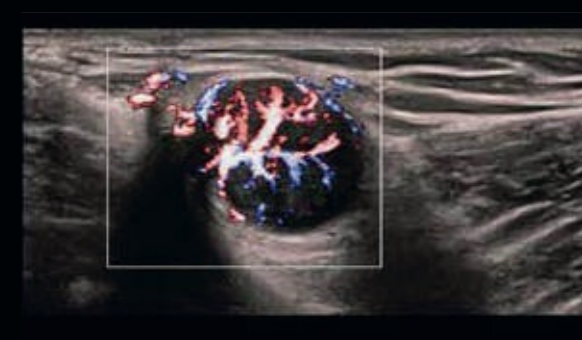

HR Flow en los ganglios linfáticos metastásicos

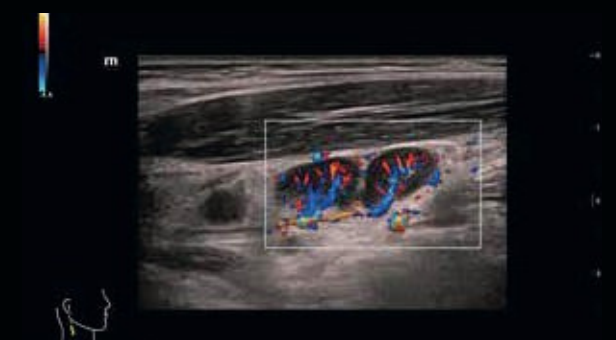

Glazing Flow en los ganglios linfáticos cervicales



+52 5516124892



www.polymediccompany.com