


LO MEJOR PARA UNA COMPLETA Y FÁCIL ESTERILIZACIÓN POR VAPOR

Con un diseño único, fabricado con la más alta calidad para garantizar su efectividad y la seguridad de los pacientes.

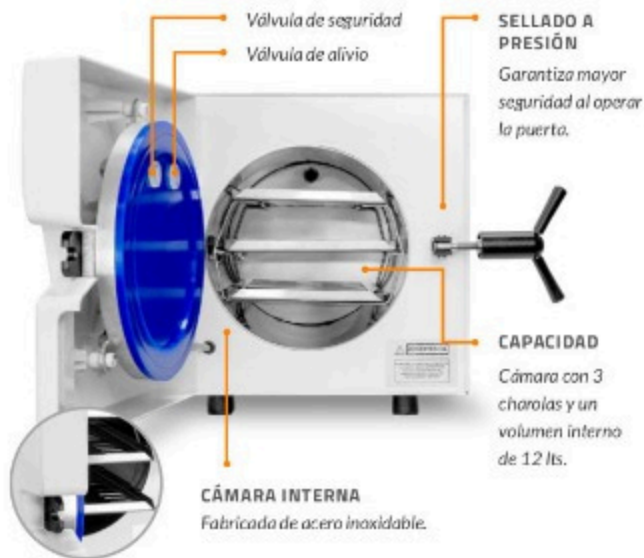

Pantalla LCD


Brinda mayor control para monitorear los ciclos de esterilización. Se observa: tiempo, temperatura, presión, y el estado de trabajo de los programas de esterilización*.

2 Años de Garantía

Nuestros usuarios son nuestra prioridad, contamos con el servicio técnico más eficiente del mercado.

*3 PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN

PROGRAMA	1	2	3
GRADOS (C°)	135°	132°	121°
TIEMPO (MINUTOS)	10	15	30
PRESIÓN (KG/CM²)	2.4-2.6	2.2-2.4	1.2-1.4
SECADO (30 MIN)	SÍ	SÍ	SÍ

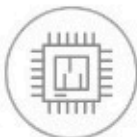

Sistema operado por un microcontrolador

Control absoluto en el sistema de operación y ciclos de esterilización sin ningún error.



LED indicador

Ayuda a un mejor manejo dando seguridad y confianza al esterilizar su material.



Acabado Impecable

La línea de Autoclave LORMA es lisa e impecable, proporcionando a la vista un aspecto moderno.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones Equipo

Largo: 33.0 cm.

Ancho: 61.0 cm.

Alto: 34.5 cm.

Dimensiones Cámara

Profundidad: 34.0 cm.

Diámetro: 21.0 cm.

Dimensiones Charolas

Charola 1: 22.5x17 cm.

Charola 2: 22.5x18.7 cm.

Charola 3: 22.5x17 cm.

Eléctrico

Alimentación: 127V~ / 60Hz.

Potencia: 1050 W.

Fusible: 10A Europeo

Datos

Agua: Bidestillada

Temperatura máx.: 135°C.

Sensor de presión: 0-7 Kg/cm²

Vaso dosificador: 150 ml.

Sellado puerta:

Silicón grado higiénico.

Manguera: 1/4"

Válvula de Seguridad: 3.5 Kg/cm²

Mango para charolas.



www.polymediccompany.com