

Cuna Neonatal con música, balanza y ajustes ergonómicos

Medibaby Music



- Balanza.
- Agarradera móvil.
- Frenos de seguridad.
- Angulo de inclinación, 15°.
- Panel de control con teclado táctil.
- Medidor de temperatura ambiental.
- Reproductor de música en formato MP3.
- Altura ajustable por medio de sistema hidráulico.



¡Confort, tecnología y cuidado en una sola cuna: música, peso y seguridad para los más pequeños, con ajuste perfecto para cada necesidad!

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.






› Estructura

Estructura de acero recubierto de electroforesis, base de ABS, columna perfilada de aluminio, lavabo para bebés de ABS · Pedal para ajustar la altura de la cuna (verde para movimiento hacia arriba, rojo para movimiento hacia abajo).

› Palanca para posición Trendelenburg

Palanca ubicada debajo de la pantalla LCD, tire de la palanca hacia afuera con sus figuras, luego sostenga la cuna para obtener la posición de Trendelenburg o la posición de Trendelenburg invertida.

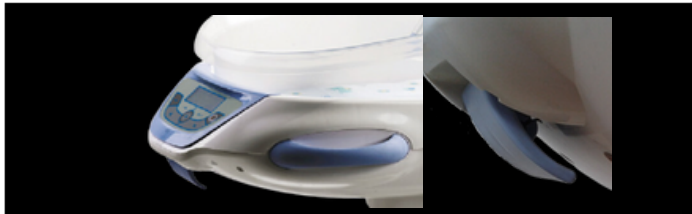


› Pantalla LCD

Instale la batería y encienda la pantalla LCD, la pantalla activa automáticamente la función de báscula de peso, se muestra el peso como se muestra a continuación, el peso es para el bebé o el objeto dentro del recipiente para bebés.



› Teclado

1. Botón "MODE", seleccione el modo de trabajo.
2. Botón "ATRÁS", reproduce la canción anterior en el estado de reproducción de música.
3. Botón "PAUSA", pausa y reproduce la canción en el estado de reproducción de música.
4. Botón "ADELANTE", reproduce la siguiente canción en el estado de reproducción de música.
5. Botón "POWER", para encender o apagar la pantalla.
6. Botón "Volumen+".
7. Botón "Volumen-".

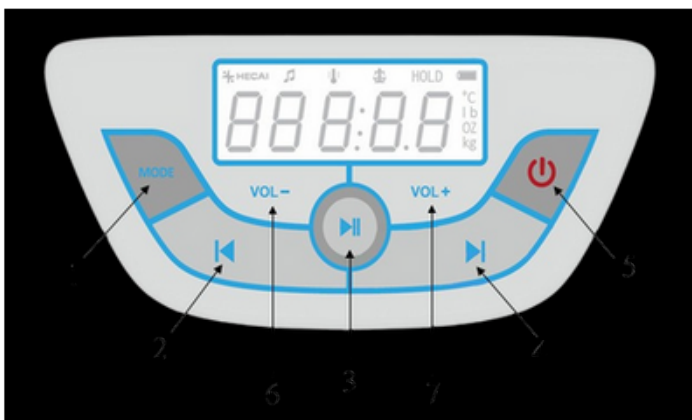

› Especificaciones técnicas

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Dimensiones | 800*420*855*1045mm |
| Altura | 855*1045mm |
| Trendelenburg | 12° |
| Trendelenburg Inverso | 15° |
| Dimensión del espacio para bebés | 800*420 mm |
| Capacidad de carga | 20 kg |
| Ruedas | 4 unidades de 100mm |

Todo lo que un recién nacido necesita: una cuna neonatal con música, balanza y ajustes ergonómicos para brindar confort y seguridad desde el primer día

Consulta nuestros métodos de compra



Transferencia Bancaria

Efectivo



VISA

COMPAS

Pago con tarjeta 4.5% + IVA

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com