



BeneHeart D1

Desfibrilador



VENTA DE EQUIPO MÉDICO
Polymedic
Tecnología al servicio de la salud

mindray
healthcare within reach



+52 5516124892



www.polymediccompany.com

BeneHeart D1

Desfibrilador

Una potente herramienta para los profesionales de emergencias

BeneHeart D1 es un potente desfibrilador externo automático (DEA). BeneHeart D1 brinda asistencia durante todo el proceso de respuesta de emergencia, es ligero (3.3 kg), compacto (28.8 cm x 21 cm x 8 cm), robusto y muy fácil de usar, a la vez que ofrece todas las funciones de un DEA estándar.

Basada en tecnología bifásica, la energía proporcionada puede aumentarse hasta 300 J y 360 J. BeneHeart D1 permite mejorar la tasa de éxito en las desfibrilaciones incrementando las dosis de los choques sucesivos.

Al emplearse en situaciones de trabajo estresante y donde el tiempo es crucial, la configuración profesional del D1 está especialmente diseñada para equipos de Soporte Vital Básico (SVB) y Soporte Vital Avanzado (SVA) para tratar a pacientes con paro cardíaco y proporcionar monitorización continua del ECG. Gracias a sus funciones inteligentes y a su intuitiva interfaz de usuario, el D1 se convierte en un salvavidas eficiente y flexible para los profesionales de emergencias.





Eficiente

Proporciona asistencia al equipo de soporte vital básico para que puedan responder con mayor rapidez.


Su gran pantalla TFT de 7 pulgadas permite mostrar una guía visual con animaciones en colores.

Los electrodos preconectados ahorran tiempo.

Cambio simple entre pacientes pediátricos y adultos con la presión de un botón.

Identificación automática del tipo de paciente a través del conector del electrodo, de modo que se suministre una dosis menor de energía a los pacientes pediátricos.

El volumen y el brillo de la pantalla de ajuste automático permiten utilizar cómodamente el D1 en diversos entornos.

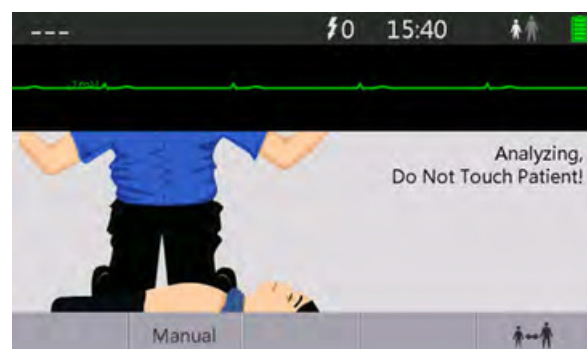

Flexible

Ayuda al equipo de soporte vital avanzado a suministrar terapias más profesionales

El modo manual real con selección del nivel de energía ofrece el proceso completo de pasos 1-2-3 para proporcionar descargas de alta calidad al paciente. La monitorización de ECG independiente de 3 derivaciones, a través de conectores separados, permite ver más derivaciones del ECG o arritmias mientras los electrodos todavía están en uso. También dispone de cardioversión sincronizada.



BeneHeart D1

Desfibrilador



BeneHeart D1 tiene un alto nivel de protección (IP55) contra el polvo y el agua.

Batería y cargador externo



BeneHeart D1 con una batería de iones de litio admite más de 300 choques a 200 J o 200 choques a 360 J, así como 12 horas de monitorización. El cargador externo mantiene una batería de repuesto cargada y lista para usar.

* La batería de iones de litio es compatible con los equipos BeneHeart D3.

Indicador LED



Se realizan autoevaluaciones automáticas periódicas y los resultados se muestran a través de alertas audiovisuales. Además, un indicador visual de color verde confirma que el D1 está listo para usar.

Bolsa de transporte



La bolsa de transporte tiene espacio para el D1 junto con una batería de repuesto, cable y latiguillos de ECG, así como, un pequeño Kit de tijeras y una cuchilla.

Puerto USB



Se pueden exportar datos del D1 a través de un puerto USB y revisarlos en una PC mediante el software Mindray.

