



HyBase V8

Mesa de cirugía

mindray
healthcare within reach

Versatilidad para brindar un mayor nivel de atención

- Capacidad máxima de 460 kg.
- Desplazamiento longitudinal de hasta 350 mm; acceso libre al arco en C.
- Rango de movimiento vertical de 600 a 1050 mm/595 a 1095 mm.
- Sistema inteligente de protección contra colisiones para detener el movimiento de la mesa antes de que ocurra una colisión (HyBase V8).
- De 12 a 18 movimientos eléctricos, como el elevador eléctrico para el cuerpo, las placas para las piernas y la función E-drive, que se adaptan a las diversas necesidades quirúrgicas.
- Control manual Bluetooth para manejo sin problemas en el quirófano.

Flexibilidad para múltiples disciplinas

Satisface las necesidades de diferentes posiciones quirúrgicas

Varias posiciones

El diseño modular de la mesa se adapta a las diversas necesidades quirúrgicas, lo que también puede reducir el costo para los hospitales, ya que solo necesitan comprar el módulo específico, en lugar de una mesa nueva, para un tipo quirúrgico adicional.

- Desplazamiento de hasta 350mm
- Base ultrafina de 120/140 mm
- Ángulo de pendiente máximo de 36°
- Acceso amplio a imágenes

Eficiencia en cada paso

Mejora de la eficiencia en el quirófano

Fácil de usar

Fácil de mover

Fácil de limpiar

Fácil de controlar



Solicita tu cotización

Seguridad para varias situaciones quirúrgicas



Mejora de la seguridad del paciente.

Sistema de reconocimiento de módulos

La mesa cuenta con una placa lumbar y pequeñas placas para las piernas que están configuradas con el sistema de reconocimiento de módulos para evitar choques entre los módulos y el piso.

Sistema de protección inteligente contra colisiones

El sistema de protección inteligente contra colisiones (ICPS™) monitorea las posiciones de los elementos de la mesa durante el movimiento para que el sistema de reconocimiento de módulos evite choques. Este sistema también evita que la placa para las piernas choque con objetos sólidos cuando la mesa está cubierta con sábanas quirúrgicas estériles.

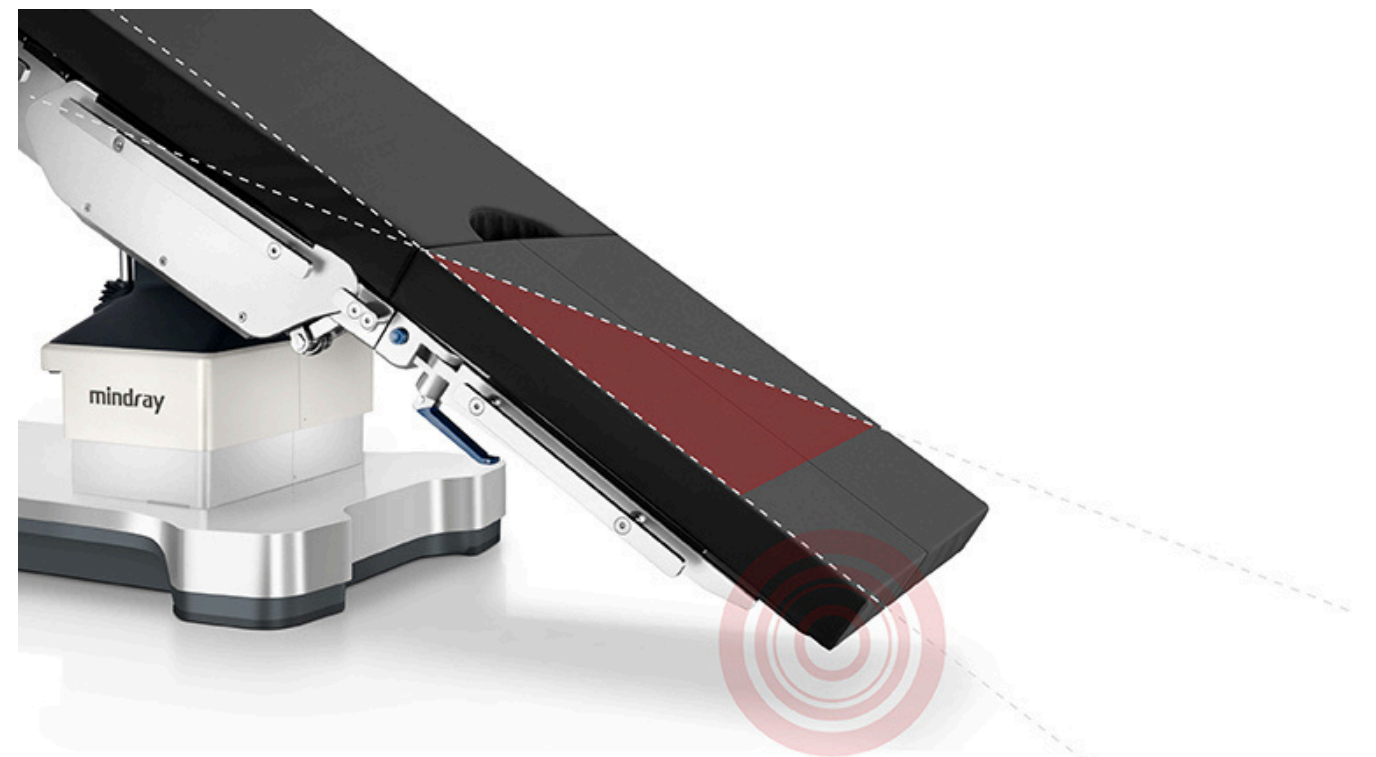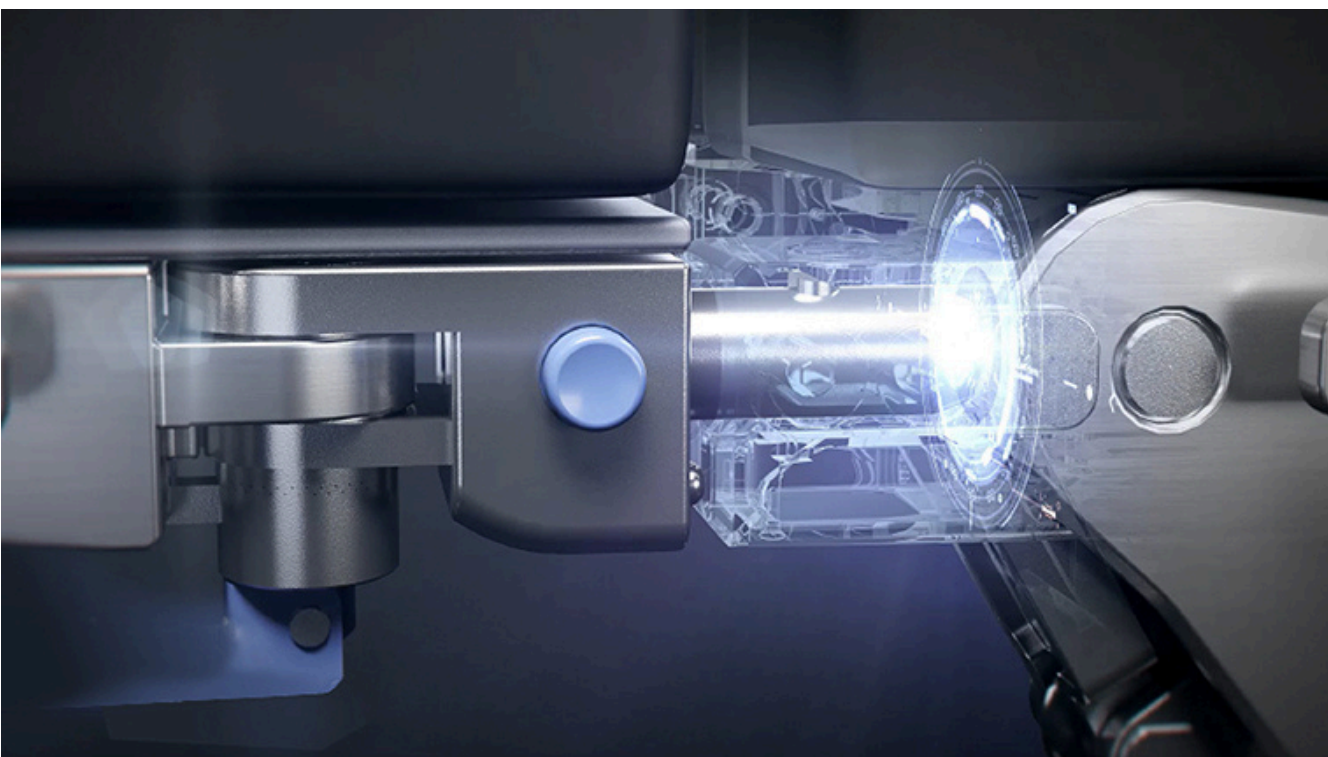

Tecnología de indicación codificada por colores

Durante el ajuste de inclinación o de pendiente, aparece un indicador codificado por colores en la pantalla para mostrar el ángulo y emitir una advertencia oportuna en caso de posiciones de Trendelenburg y Trendelenburg inversa excesivas.

Sistema de anulación manual

Permite los movimientos de articulación de la mesa y la liberación del freno en caso de mal funcionamiento del control primario o de la alimentación a través de un circuito hidráulico independiente.

