


mindray
animal medical

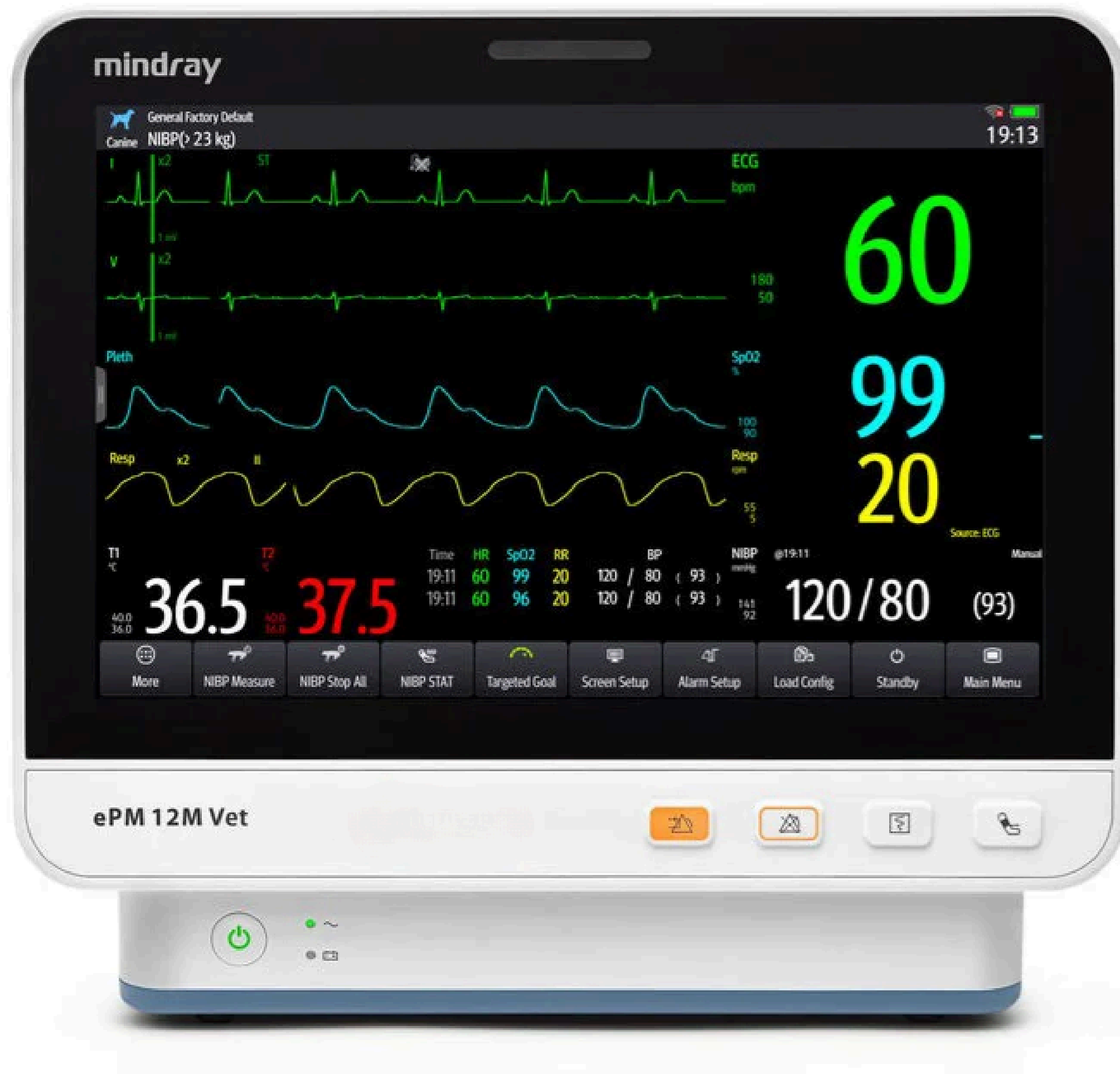

ePM 12 Vet

Monitor Veterinario de Signos Vitales

POLYMEDIC
TECNOLOGÍA QUE CUIDA

www.polymediccompany.com

55 1612 4892

ventas@polymediccompany.com

Excelente Rendimiento

ePM 12M Vet admite parámetros avanzados con un rendimiento excelente y preciso. La innovadora tecnología CrozFusion puede proporcionar un rendimiento continuo y estable durante las interferencias ambientales.

Algoritmos precisos

- NIBP: Algoritmo específico para veterinarios, adaptable a señales débiles y antiinterferencias
- ECG: Algoritmo de análisis de múltiples derivaciones, una patente exclusiva de Mindray
- SpO2 : Algoritmo de baja perfusión y antimovimiento

Control exhaustivo de los parámetros

- Diseño innovador del asa de elevación y expansión flexible
- Admite parámetros avanzados: CO₂, 4-IBP, C.O., AG, O₂
- CO₂: Tecnología Artema con 30 años de experiencia técnica

CrozFusion™

El análisis conjunto de las señales de ECG y SpO₂ garantiza un rendimiento estable y preciso aún en condiciones de conexión ineficiente o interferencia eléctrica. Reduce las falsas alarmas de arritmia y alivia a los veterinarios de la fatiga por alarmas excesivas.



Inteligente y simple

El ePM 12M Vet ofrece a los médicos y al personal de enfermería aplicaciones inteligentes y una información intraoperativa más rica, lo que hace que la supervisión sea más cómoda y la vigilancia en cirugía sea más eficaz.

Detección y Alerta inteligente de desconexión de derivaciones



- Cambia automáticamente a una derivación disponible si la derivación principal de ECG se desprende, lo que asegura una monitorización continua.
- Un solo clic confirma qué pista se ha desprendido, lo que aumenta la eficacia de la resolución de problemas.

Visualización del rango objetivo de referencia

- El cuadro de mandos del rango objetivo para los parámetros clave ayuda a centrarse en los en ellos durante la cirugía.
- Rangos de objetivos y selección de parámetros clave personalizables.

Configuración personalizada

- Memoria para hasta 25 configuraciones personalizadas. Configuraciones identificables con diferentes ajustes de límites de alarma para diferentes especies o pacientes.
- Admite la carga de unidades USB con un solo clic, lo que evita la repetición de cambios manuales de la configuración.

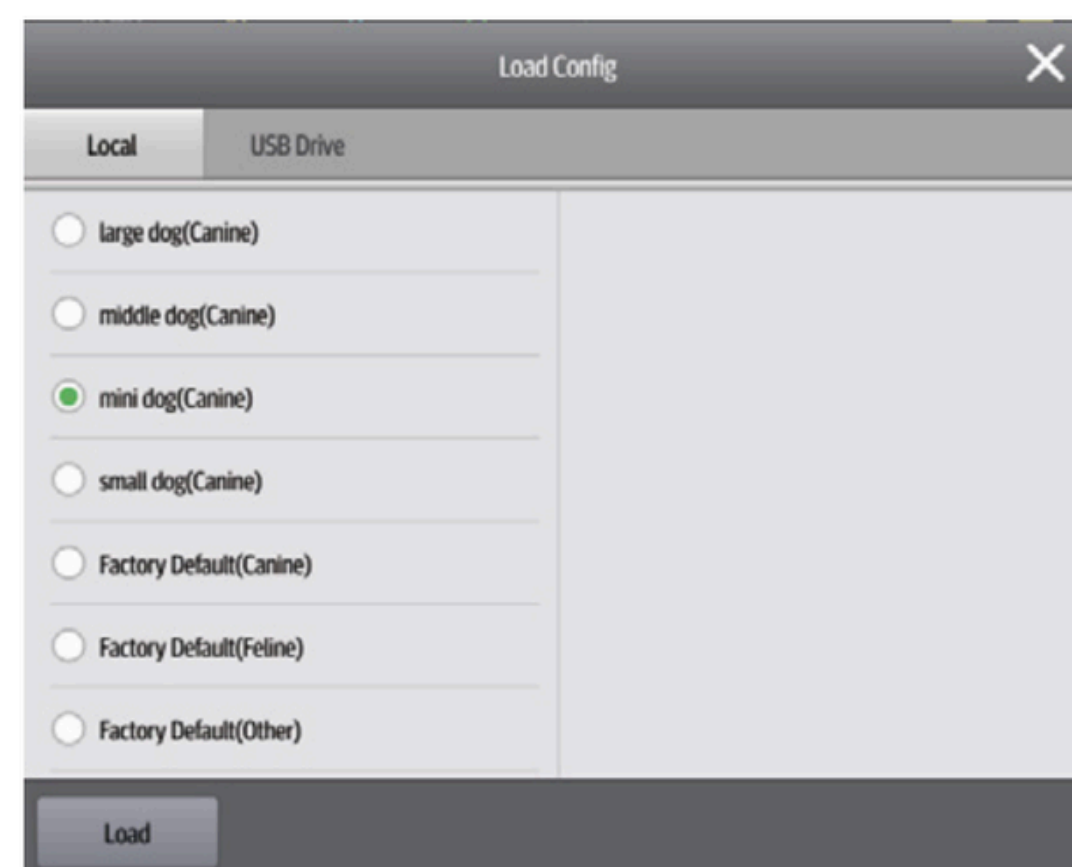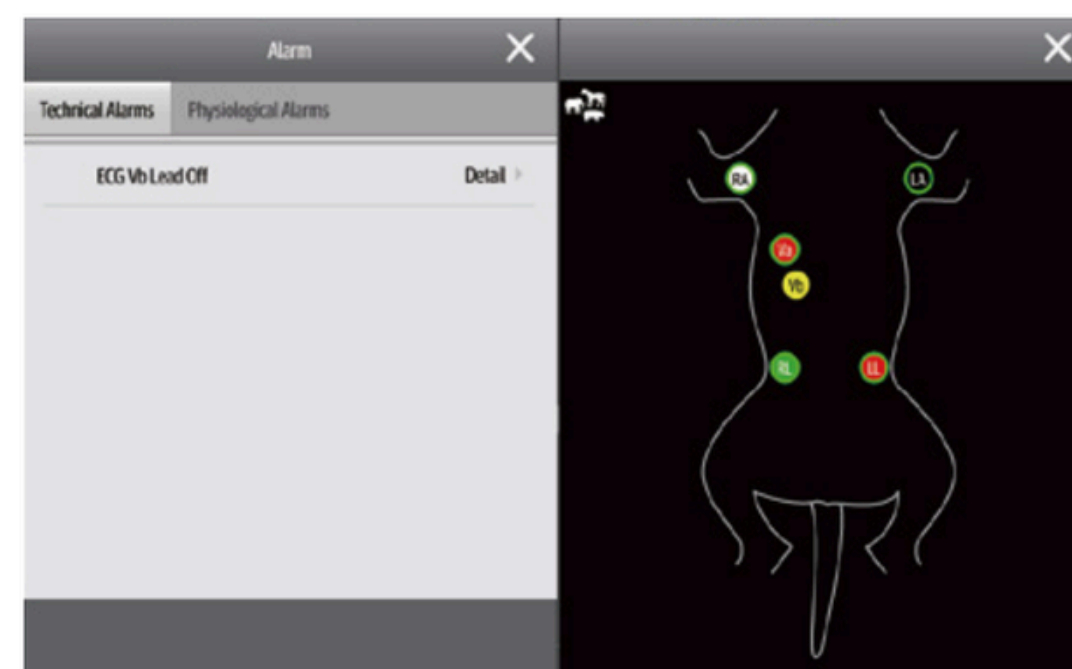

Calidad fiable

El ePM 12M Vet Y sus accesorios están fabricados con materiales de la más alta calidad. Son seguros, duraderos y están hechos para resistir.

Materiales de carcasa de alta calidad

Se ha demostrado que la línea ePM Vet resiste 49 tipos de limpiadores y desinfectantes, sin que la superficie se degrade o se vea comprometida.

Diseño de enfriamiento sin ventilador

- Mantiene el pelaje fuera del equipo
- Reduce la contaminación cruzada, lo que protege la salud de los pacientes y del personal.
- No hay polvo interno, lo que prolonga la vida útil del monitor

Accesorios profesionales para animales

- Se adapta mejor a la piel de los animales. Lo que permite un contacto más estable, asegurando medición sin interrupciones
- Gracias a su diseño ergonómico, se adapta mejor al tamaño de los animales. Reduce el daño a los animales
- Una prueba de flexión de mil veces. Garantiza la fiabilidad y durabilidad de los accesorios



ECG: Clips de cocodrilo



SpO₂: Clips de múltiples tamaños



NIBP: Manguitos de varios tamaños para diferentes animales