



RV12

Refrigerador para Farmacia 12 Pies Cúbicos

Refrigerador Para Vacunas con Congelador, Fabricado con la Más Alta Calidad y Estándares Establecidos para Satisfacer sus Necesidades, Contenedor de Material a Temperatura de Refrigeración Para Guarda de Vacunas, Con Capacidad de 12 Pies Cúbicos +/- 1 Pie Cubico Incluyendo Congelador. Diseñado Para Mantener Temperaturas Homogénea y Constantes en un Rango de Temperatura de +2° C a +8° C +42°C

Características

Paneles Internos y Externos

Los Paneles Interiores y Exteriores, el Gabinete y Panel de la Puerta están fabricados en Acero Inoxidable Tipo AISI-304 Tipo Sanitario.

Con Espesor Mínimo de 4.5 cm con Aislamiento de Espuma Presurizada de Poliuretano Libre de CFC's (Compuestos ClorofluoroCarbonados).

Inyectada en Sitio Libre de CFC's (Rígida).

Densidad de la Espuma de 38 Kg/m³.

Puerta

- Una Sola Puerta Solida Fabricada en Lamina de Acero Inoxidable Tipo AISI-304 Sanitario Sin Marco Exterior.
- Empaque Magnético con Sellado Hermético.
- Mecanismo Auto Cierre.
- En la Parte Interna Completamente Lisa de Acero Inoxidable Tipo AISI-304 Sanitario Sin Molduras, Anaqueles ni Retenes. (Linner Completamente Liso).
- Espesor Mínimo de 4.5 cm. con Aislamiento de Espuma Presurizada de Poliuretano.

Congelador

El Congelador está Colocado en el Mismo Cuerpo del Refrigerador en la Parte Superior, de una Sola Pieza sin Separador Aislante Capaz de Mantener una Temperatura Homogénea y Constante en el Refrigerador.

- Congelador Capacidad de 2 a 3 Pies Cúbicos.
- Enfriamiento por Convección por Difusor de Aire Circulante, colocado al Fondo del Congelador Para Optimizar la Uniformidad de Temperaturas en Todo el Refrigerador.

Control de Temperatura

Es un Dispositivo que Controla el Funcionamiento del Sistema de Enfriamiento del Equipo, con las Sigüientes Características:

- Control Microprocesado de Temperatura con Despliegue Digital (Display) de al Menos 3 Dígitos, con Un Dígito Para Punto Decimal y Sistema de Paro-Arranque Automático del Compresor.
- Despliegue Digital de Temperatura 3 Dígitos, 2 Dígitos y Punto Decimal.
- Termómetro Digital con Display, con Respaldo de Batería Recargable de al Menos 48 Horas en Caso de Falla de Energía Eléctrica.
- El Refrigerador Debe ser Capaz de Mantener Temperatura Interna Dentro de un Rango de +2°C a +8°C, Aún en Condiciones Ambientales de Hasta 42°C.
- Sensor de Temperatura Localizado al Centro del Refrigerador Para Obtener una lectura Precisa de la Temperatura Interna del Refrigerador.

Graficador de Temperatura Externo

Es un Dispositivo Digital con Capacidad de Monitorear la Temperatura Interna del Refrigerador con las Siguientes Características.

- Despliegue en Pantalla de Temperatura con 2 Dígitos, 1 Decimal y Punto Decimal y una Resolución de Pantalla: 0.1 Rangos de Medición de Temperatura: -25°C a +25°C.
- Capacidad de Grabación: Cada 130,000 Puntos (MAX), Provisto con un Sistema de Alimentación de Papel Automático (Rollo) Equivalente a Papel Grafico de Diámetro de 12 a 14 Cms.
- Ciclo de Registro y Almacenamiento de Datos de 7 Días, Capacidad de Grabación con Respaldo de Información hasta por 365 Días con Memoria EPROM Personalizado Por medio de Una Entrada USB Localizada en la Parte Del Frente del Refrigerador, Para Recopilación de Registros en Rollo de Impresión con Tres Tóner Para Impresión y Registro de Temperaturas.
- Cuenta con un Sensor Térmico. Localizado Internamente al Centro del Refrigerador para Obtener una Lectura Precisa.
- Temperatura Uniformemente con una Precisión del Sensor de +/-1°C.
- Funciona Independientemente al Suministro Eléctrico del Refrigerador, Operado con Batería Recargables de Reserva con Duración Mínima de 36 horas.

Compresor

- Capacidad de 1/4 H.P.
- Con Sello Hermético lo que Permite un Ahorro de Energía y Bajo Nivel de Ruido (Silencioso).
- Libre de Mantenimiento.
- Sistema de Paro-Arranque Automático.
- Con refrigerante libre Cloro-Flúoro-Carbonos (CFC's) Tipo SUVA® 134a.
- Deshielo Automático.

Condensador

- Este Módulo es Libre de Mantenimiento, Tipo Caracol Hecho de Aluminio y Tubos de Cobre.
- Dinámico y con Capacidad de Acuerdo al Equipo.

Interior

- 4 Parrillas Ajustables de Acero Inoxidable Tipo Aisi-304 Sanitario.
- 4 Charolas ó Canastilla de Acero Inoxidable Tipo Aisi-304 Sanitario.
- Con Esquinas Redondeadas, Sin Filos o Rebabas, Montadas Independientemente para Estibar Vacunas, Con Perforaciones Múltiples Simétricas No Mayores de 1 cm.

Regulador de Voltaje

- El Refrigerador esta Provisto con un Sistema de Protección el cual es un Regulador de Voltaje para Refrigeración con un Rango de 90 V A 140 V con Capacidad Mínima de 1500 VA con Bloqueo y Desbloqueo Automático con función de Retardo al Arranque Programable de 1 a 4 min. para Protección de Sobre Cargas.

Niveladores / Regatones

- Cuenta con 4 Niveladores con Base Aislante Para Ajuste en Superficies Irregulares

Dimensiones

- Capacidad: 12 ft³
- Altura: 1.70 m
- Frente: 0.75 m
- Fondo: 0.75 m

Suministro Eléctrico

120 V +/- 10% 60Hz


Consumibles

- 5 Rollos de Papel Para Graficador.
- 3 Cintas Toner Para Graficador Digital.
- Manual de Operación






CONTROL DIGITAL DE
TEMPERATURA

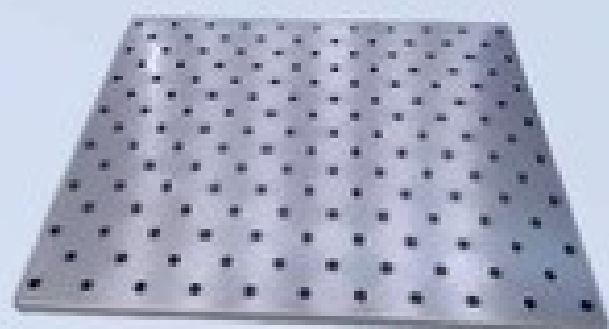

PARRILLAS ..



LLAVE Y CERRADURA

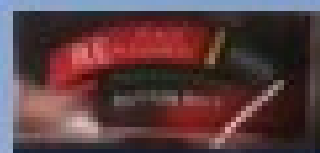

INDICADOR DE CARGA
BATERÍA



SENSORES DE
TEMPERATURA



NIVELADORES/REGATONES



GRAFICADORES DE
TEMPERATURA



ILUMINACIÓN DE LUZ
LED



BOTONES DE CONTROL Y
ALARMAS



INDICADOR DE
ALARMA
VISUAL/ AUDIBLE



RECARGA DE
BATERÍA



SILENCIADOR/
INDICADOR DE
FALLA DE
ENERGÍA

INTERRUPTOR GENERAL
ENCENDIDO/APAGADO

