



TUX5-55

Torre de Laparoscopia

mindray
healthcare within reach

La torre de laparoscopia Mindray UX5 con pantalla 4K de 55 pulgadas ofrece una solución integral para procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos. Su alta resolución y componentes integrados garantizan imágenes nítidas y un manejo ergonómico que mejora la precisión y eficiencia en el quirófano.

Vista inteligente

Calidad de imagen excepcional


Enfoque automático e imagen de alta calidad con un solo toque

La combinación perfecta de estructura mecánica y diseño óptico y la gran potencia informática del nuevo chip de imagen permite un enfoque preciso y eficaz y reduce las operaciones manuales, lo que permite al cirujano centrarse en la cirugía con una imagen perfecta.

Reconocimiento automático de imagen, ajuste de brillo inteligente

Exposición inteligente: determine diferentes áreas de detección en función de diferentes escenarios y haga coincidir con precisión los parámetros de exposición sin necesidad de cambiar manualmente los modos del escenario.

Oscurecimiento automático: el sistema de cámara puede ajustar automáticamente la intensidad de la fuente de luz en tiempo real en función de los requisitos de exposición de la imagen actual y garantizar un brillo adecuado.

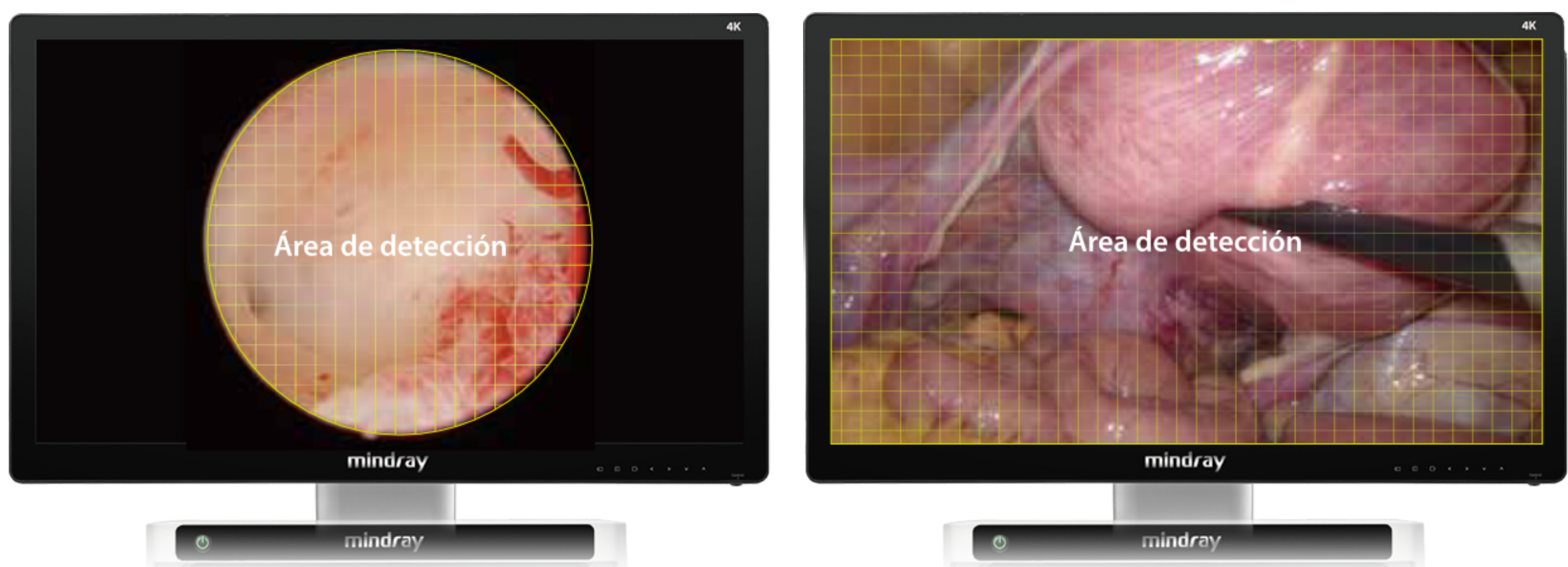

Solicita tu cotización

Percepción sensible

- Sensibilidad ultra alta de la fluorescencia
- Algoritmo de estabilización de la fluorescencia
- Fusión de fluorescencias a nivel de píxel

Control inteligente

- Dominio flexible
- Zoom adaptativo automático con un toque

Grabación 4K integrada con tasa de bits variable + codificación H.265

La grabación de vídeo de alta calidad 4K reproduce vívidamente todo el proceso de la cirugía, lo que permite un intercambio académico de calidad. Al mismo tiempo, la tasa de bits variable y la codificación H.265 reducen el tamaño del archivo un 50 % para obtener la misma calidad, lo que significa menos preocupación por el almacenamiento.



- Carro master con interruptor de botón
- Fuente de luz con luz blanca/fluorescencia
- Videograbador digital médico
- Monitor 3D 4K de 32/55 pulgadas
- Cabezal de cámara con luz blanca/fluorescencia
- Endoscopio rígido de 10/5mm

Solicita tu cotización