




mindray

DP-20

Ultrasonido Portátil

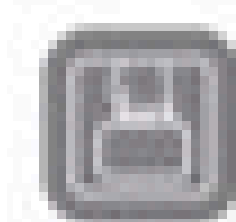

Portable

Sistema ligero con batería

P | **POLYMEDIC**
TECNOLOGÍA QUE CUIDA



www.polymediccompany.com



55 1612 4892



ventas@polymediccompany.com

DP-20, un ecógrafo Blanco y Negro, el cual proporciona más avances a las prácticas generales para mejorar los beneficios de los pacientes. Gracias a que entendemos en profundidad las necesidades de nuestros clientes, creemos que esta nueva generación de sistemas de ecografía portátiles constituirá la mejor elección cuando desee más a un menor precio.

Características técnicas:

- Pantalla LED de alta resolución de 12,1 pulgadas con función de inclinación.
- Teclado y controles fáciles de usar
- Fácil de transportar con un peso de tan solo 5,1 kg.



Actuación

Imágenes armónicas de tejidos: Mediante la utilización de segundos armónicos generados a partir de las capas límite de los tejidos, THI mejora significativamente la resolución de contraste y la calidad de la imagen, especialmente en sujetos técnicamente difíciles.

TSI: La tecnología de imagen específica para tejidos optimiza la calidad de la imagen en función de las propiedades del tejido que se está analizando. Se ofrecen cuatro opciones de imagen: general, muscular, líquida y grasa.

iClear: Obtenga una calidad de imagen mejorada gracias a la detección automática de estructuras.

Campo de visión exterior: Descubra información diagnóstica más precisa gracias a la visión ampliada de la estructura anatómica en todas las sondas convexas y lineales.




Solicita tu cotización

Flujo de Trabajo


iStation: Transfiere imágenes e informes directamente al PC mediante cable de red.

iStation™: El exclusivo sistema de gestión de información del paciente de Mindray le permite integrar, revisar, archivar y recuperar datos de pacientes de forma eficaz.

IP: Mecanismo de mejora de imagen que consta de varios parámetros.

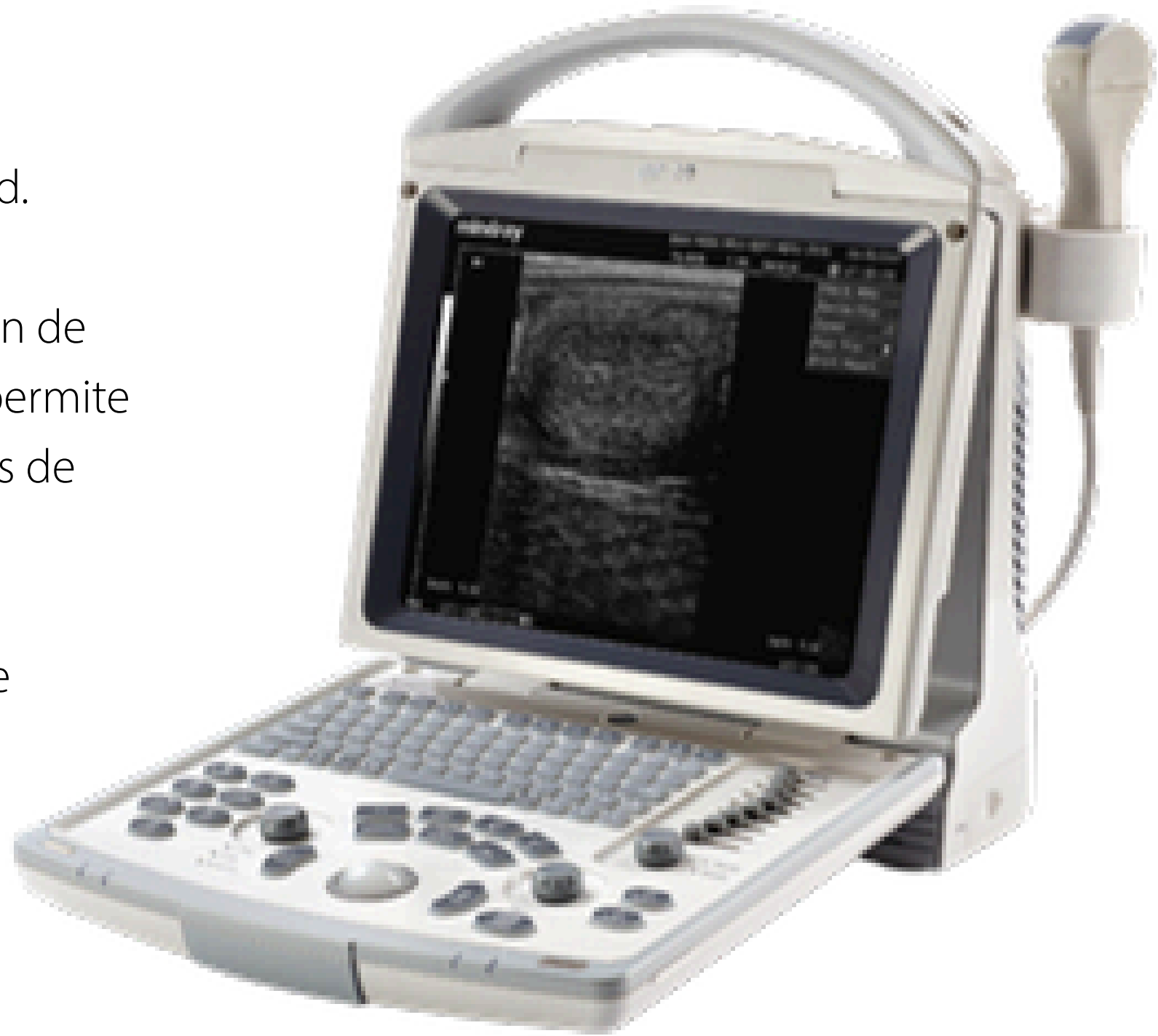

Imágenes Clínicas de Alto Rendimiento

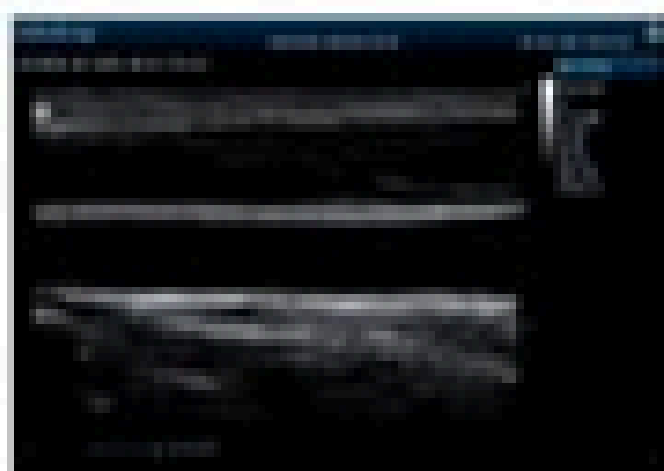


Carótida



IVC



Hígado

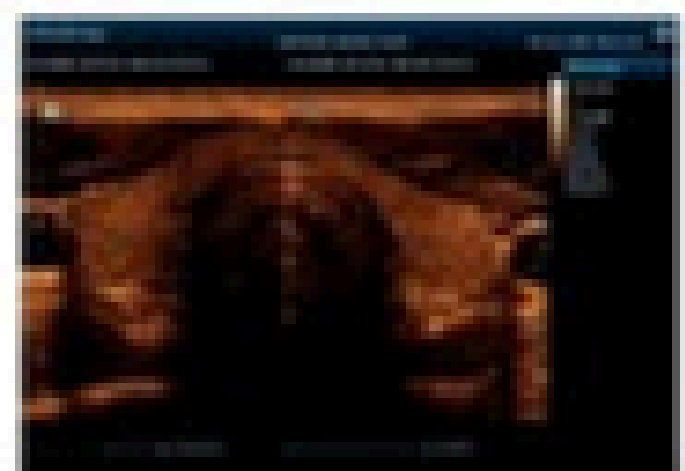

Tiroides completa con modo dual

Solicita tu cotización